



# Levilog

## Brugsvejledning

Dato: 25. maj 2026

Dokumentnummer: AT06-17 (DK)

Dokumentversion: 4.0

Produktversion: 1.0

Produkt-ID: AT06

Grundlæggende UDI-DI: 73323531000LX

CE

<b>Levilog</b>	<b>1</b>
1. Om Levilog	3
1.1 Producent	4
1.2 Tilsigtet brug	4
1.3 Hvem kan bruge Levilog?	4
1.4 Kontraindikationer	5
1.5 Hvordan fungerer Levilog?	5
1.5.1 Medicinpåmindelser på det rigtige tidspunkt	5
1.5.2 Log dine doser	5
1.5.3 Du skal have en gyldig recept	5
2. Oplysninger om risici og fordele	6
2.1 Risici ved brug af Levilog	6
2.2 Fordele ved at bruge Levilog	6
2.3 Advarsler og forsigtighedsforanstaltninger	6
2.4 Indberet alvorlige hændelser	8
3. Kom i gang	8
3.1 Tekniske krav	8
3.2 Softwareopdateringer og systemkrav	8
3.2.1 Software- og sikkerhedsopdateringer	8
3.2.2 Systemkrav	9
3.3 Installation	9
3.3.1 Sådan installerer du Levilog på din iPhone eller iPad:	9
3.3.2 Sådan installerer du Levilog på din Android:	10
3.4 Registrering	10
3.4.1 Bekræft din recept	10
3.4.2 Giv appen tilladelse til at behandle dine data.	11
3.4.3 Opret konto	11
3.4.4 Opret din doseringsplan	11
3.4.5 Aktivér notifikationer	12
3.4.6 Indstil påmindelser om genopfyldning af medicin	13
3.5 Log ind	14

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

4. Sådan bruger du Levilog	15
4.1 Notifikationer	15
4.2 Din dag	15
4.3 Historik	16
4.4 Medicin	16
4.5 Indstillinger	17
4.6 Hvor ofte skal du bruge Levilog?	19
5. Teknisk support	20
5.1 Kontakt support	20
5.2 Nulstil adgangskode	20
5.3 Udskriv brugsvejledningen	20
6. Ordliste over ISO-symboler	22
7. Kontaktoplysninger	24

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

# 1. Om Levilog

## 1.1 Producent

Navamedic AB  
Göteborgsvägen 74  
433 63 Sävedalen  
Sverige

## 1.2 Tilsigtet brug

Levilog er beregnet til at understøtte behandlingen af Parkinsons sygdom ved at lette overholdelsen af ordineret medicin. Levilog giver patienter påmindelser for at hjælpe dem med at tage den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt samt logge og følge op på deres medicinindtag.

## 1.3 Hvem kan bruge Levilog?

Levilog er beregnet til dig, hvis:

- du bruger et lægemiddel, der distribueres ved hjælp af en OraFID-dosisdispenser til at behandle din Parkinsons sygdom.
- Du er 18 år eller ældre.
- Du er bekendt med, hvordan man bruger smartphones og mobilapps.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 1.4 Kontraindikationer

Appen skal kun bruges til at håndtere lægemiddelbehandlinger, der distribueres ved hjælp af en OraFID, den er ikke egnet til at bruge til at håndtere anden medicin.

## 1.5 Hvordan fungerer Levilog?

### 1.5.1 Medicinpåmindelser på det rigtige tidspunkt

Levilog sender notifikationer for at advare dig, når det er tid til din medicindosis. Når du trykker på en notifikation, åbnes appen, så du kan registrere, at du har indtaget dosis. Levilog sender også notifikationer, når du begynder at løbe tør for tabletter i din nuværende OraFID-dispenser, så du kan sikre dig, at du har en ny dispenser klar.

### 1.5.2 Log dine doser

Du kan navigere til skærmen "Din dag" for at logge dine planlagte doser eller ekstra doser af din medicin.

Jo mere omhyggeligt du logger dit indtag af din medicin, jo bedre vil appen fungere for dig. For eksempel vil du modtage rettidige påmindelser, når din OraFID-dispenser er ved at løbe tør, en nøjagtig historik og indsigt i, hvor meget medicin du har indtaget fra dag til dag.

### 1.5.3 Du skal have en gyldig recept

For at få adgang til Levilog skal du have en gyldig recept på en medicin, der distribueres i en OraFID-dispenser. For at oprette en konto skal du derfor bekræfte din recept ved at scanne et nummer på din medicinemballage eller din

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

doseringsdispenser, så sørg for at have din medicin i nærheden, første gang du åbner appen.

## 2. Oplysninger om risici og fordele

### 2.1 Risici ved brug af Levilog

Der er ingen kendte alvorlige risici ved at bruge Levilog. Det er dog et støtteværktøj og bør ikke bruges som den eneste metode til at sikre korrekt medicinering. Levilogs funktionalitet afhænger af korrekt brugerinput, korrekte systemindstillinger og en stabil internetforbindelse.

### 2.2 Fordele ved at bruge Levilog

Levilog hjælper dig med at følge din ordinerede dosering. Ved at tage din medicin på hvert foreskrevet tidspunkt i henhold til din læges ordination øger du chancerne for at få en stabil lindring af dine symptomer.

### 2.3 Advarsler og forsigtighedsforanstaltninger

- **For at modtage medicinpåmindelser skal du tillade appen at sende notifikationer.** Du bliver bedt om at tillade dette, når du opretter din konto. Hvis du siger nej, kan du senere gå ind i din telefons indstillinger og aktivere notifikationer.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

- **For at fortsætte med at modtage dine medicinpåmindelser skal du åbne appen mindst en gang om dagen, når telefonen er forbundet til internettet.** På denne måde sikrer du, at appen altid kan planlægge nye notifikationer.
- **For altid at modtage påmindelser fra Levilog skal du sørge for, at din telefon eller tablet ikke løber tør for batteri.**
- Når du bruger kameraet til at tilføje eller opdatere din doseringsplan, kan der være visse begrænsninger, da AI'en, der analyserer billedet, kan lave fejl. **Derfor er det vigtigt, at du altid kontrollerer antallet af tabletter og tidspunkterne for dine doser, når du opretter din plan ved hjælp af kameraet.** På denne måde kan du sikre, at din plan stemmer overens med det, din læge har ordineret.
- **Skift kun din plan i henhold til din læges instruktioner.** Levilog er designet, så du selv kan tilpasse din doseringsplan i appen i henhold til de anvisninger, din læge har givet. Det er derfor vigtigt, at du følger disse instruktioner omhyggeligt.
- **Vær opmærksom på, at funktionen "Tabletter tilbage" påvirkes af startdatoen og hvordan du logger dine doser.** Appen tæller det samlede antal tabletter i dosisdispenseren og trækker automatisk dine planlagte doser, selvom du ikke aktivt logger dem. Hvis du tilføjer ekstra doser, markerer doser som "glemt" eller ændrer antallet af tabletter i en dosis, tager appen disse ændringer i betragtning og opdaterer beregningen af de resterende tabletter.
- Når du rejser, justeres din medicinplan automatisk til din telefons tidszone. Hvis du for eksempel skal tage en dosis kl. 8:00 og rejser til en anden tidszone, modtager du en påmindelse om at tage dosis kl. 8:00 i den nye tidszone. **Før du rejser mellem forskellige tidszoner, er det vigtigt, at du drøfter med din læge, hvordan du bedst håndterer din medicinplan.**

Dokumentnummer:  
AT06-17 (DK)

Dokumentversion  
4.0

Dato:  
25. maj 2026

Produktversion  
1.0

Indberet negative eller uønskede hændelser, hændelser og ulykker relateret til brugen af Levilog til Navamedic AB og Läkemedelsverket.

## 2.4 Indberet alvorlige hændelser

Indberet negative eller uønskede hændelser, uønskede hændelser og ulykker relateret til brugen af Levilog til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du er hjemmehørende, dvs. Läkemedelsverket (i Sverige), Skattestyrelsen – Central Customs Division (i Danmark), Fimea – Läkemedelsverket (i Finland) og Legemiddelverket (i Norge).

Informér venligst producenten, Navamedic AB, via e-mail: **info@navamedic.com**.

## 3. Kom i gang

### 3.1 Tekniske krav

For at bruge Levilog skal du have adgang til en smartphone eller tablet med iOS 18 eller nyere eller Android 15 eller nyere. Du skal også have en pålidelig internetforbindelse.

### 3.2 Softwareopdateringer og systemkrav

For at sikre, at enheden fungerer sikkert og effektivt, gælder følgende bestemmelser for programopdateringer og kompatibilitet med operativsystemer:

#### 3.2.1 Software- og sikkerhedsopdateringer

- Applikationen kan modtage regelmæssige programopdateringer, herunder sikkerhedsrettelser, ydelsesforbedringer og nye funktioner.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

- Opdateringer leveres via de officielle app-distributionsplatforme (Apple App Store eller Google Play Store).
- Integriteten og ægtheden af alle opdateringer valideres automatisk af platformen før installation.
- Det anbefales at aktivere automatiske opdateringer for at sikre, at enheden altid kører den senest validerede softwareversion.

### 3.2.2 Systemkrav

- Kompatibilitet med nyere operativsystemer overvåges og testes regelmæssigt; brugere skal muligvis opdatere operativsystemet på deres enhed for at opretholde sikkerhed og funktionalitet.
- Brug af applikationen på operativsystemer, der ikke understøttes eller er for gamle, kan resultere i begrænset funktionalitet eller at den ikke kan bruges.

## 3.3 Installation

### 3.3.1 Sådan installerer du Levilog på din iPhone eller iPad:

1. Åbn App Store.
2. Skriv "Levilog" i søgefeltet, og find appen, hvis ikon ligner det vedhæftede logo.



3. Tryk på "Installer".
4. Indtast din adgangskode til Apple ID.
5. Når appen er installeret, skal du trykke på appikonet for at åbne Levilog.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

### 3.3.2 Sådan installerer du Levilog på din Android:

1. Åbn Google Play Store.
2. Skriv "Levilog" i søgefeltet, og find appen, hvis ikon ligner det vedhæftede logo.



3. Tryk på "Installer".
4. Når appen er installeret, skal du trykke på appikonet for at åbne Levilog.

## 3.4 Registrering

Når du åbner appen, kommer du til en velkomstskaerm til Levilogs startguide. Klik på "Start guiden" for at starte registreringen.

### 3.4.1 Bekræft din recept

Derefter bliver du bedt om at bekræfte, at du har en gyldig recept. Du bekræfter dette ved at indtaste "VNR"-nummeret, som du finder på emballagen og doseringsdispenseren.

Der er to måder at gøre dette på:

1. Ved at tage et billede med dit kamera af din doseringsdispenser eller medicinemballagen. Sørg for at tillade adgang til kameraet, når du bliver bedt om det, og følg derefter de angivne instruktioner.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

2. Ved at indtaste nummeret manuelt. Vælg i så fald indstillingen "Jeg vil ikke bruge kameraet". Følg derefter instruktionerne, som appen giver dig.

### 3.4.2 Giv appen tilladelse til at behandle dine data.

Du skal give dit samtykke til, at Levilog kan indsamle og behandle oplysninger om din medicin og dit medicinindtag. Dette er nødvendigt for at give dig den bedst mulige oplevelse og håndtere din doseringsplan.

Tryk på "Jeg giver mit samtykke" for at godkende og gå videre til næste trin. Du kan læse mere om, hvordan dine data behandles ved at trykke på linket "Persondatapolitik".

### 3.4.3 Opret konto

Hvis du bruger en Android-enhed, kan du registrere dig enten via din Google-konto eller med e-mail og adgangskode. Hvis du bruger en iPhone, er der de samme muligheder samt muligheden for at bruge din Apple-konto.

Hvis du vælger at registrere dig med e-mail og adgangskode, skal du bekræfte din e-mailadresse. Du modtager en e-mail med en bekræftelseskode, som du skal indtaste i appen for at fortsætte.

### 3.4.4 Opret din doseringsplan

I dette trin skal du indtaste din daglige doseringsplan i appen. Da appen giver dig mulighed for at gøre dette selv, er det vigtigt, at du selv tager ansvar for at følge din læges ordination.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

### **Hvis din læge har givet dig et papir med din plan**

Vælg "Ja, det har jeg" på spørgsmålet om, hvorvidt du har modtaget en plan fra din læge for at indtaste planen i appen ved at tage et billede. Følg derefter disse instruktioner:

1. Hvis det er første gang, appen bruger kameraet, skal du først tillade appen at bruge kameraet.
2. Tillad derefter appen at behandle data i billeder.
3. Tag et billede af papiret med din plan, og vent på, at appen analyserer billedet og opretter din plan.
4. Gennemgå omhyggeligt den plan, som appen foreslår. Vær opmærksom på, at AI'en, der analyserer billederne, kan lave fejl, så det er vigtigt at kontrollere tidspunkter og antallet af tabletter for hver dosis er korrekt.

### **Hvis du ikke har modtaget en papirkopi af din plan eller ikke ønsker at bruge kameraet**

Vælg "Nej, jeg har ikke nogen plan" på spørgsmålet om, hvorvidt du har modtaget en plan fra din læge, og opret din plan manuelt ved at følge disse trin:

1. Klik på "Tilføj dosis" for at oprette din første dosis.
2. Indtast tid og antal piller, vælg derefter "Gem".
3. Gentag processen for hver dosis, indtil du har oprettet hele din ordinerede plan.

Sørg for, at doseringsplanen i appen stemmer nøjagtigt overens med de instruktioner, din læge har givet dig. Du bør kun ændre din plan efter din læges råd.

#### **3.4.5 Aktivér notifikationer**

For at modtage påmindelser om at tage din medicin skal du tillade appen at sende notifikationer. Vi anbefaler på det varmeste, at du gør dette, da notifikationer er en

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

vigtig funktion, der hjælper dig med at tage den rigtige dosis af din medicin på det rigtige tidspunkt.

1. Når du bliver spurgt, om Levilog må sende dig notifikationer, skal du vælge "Tillad". Hvis du vælger "Tillad ikke", modtager du ikke påmindelser fra appen.

Hvis du ved et uheld vælger "Tillad ikke", kan du ændre dette i telefonens indstillinger.

2. Hvis du tillader notifikationer og bruger en iPhone, bliver du spurgt, om du vil have dine notifikationer til at afspille lyd, selv når din telefon er indstillet til lydløs. Dette anbefales, så du ikke går glip af vigtige påmindelser.

For at aktivere dette:

- a. Vælg "Ja, aktiver altid notifikationer".
  - b. Tryk på "Tillad", når telefonen spørger, om du vil tillade kritiske alarmer.
3. På det næste skærmbillede kan du gennemgå og redigere dine notifikationsindstillinger.

### 3.4.6 Indstil påmindelser om genopfyldning af medicin

Til sidst skal du indstille påmindelser om genopfyldning af medicin i funktionen "Tabletter tilbage".

For at appen kan beregne antallet af resterende tabletter korrekt, skal den vide, hvornår du begyndte at bruge din nuværende dosisbeholder. Disse oplysninger bruges til at underrette dig, når det er tid til at skifte til en ny dispenser.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

Hvis du ikke kan huske, hvornår du begyndte at bruge din nuværende dispenser, kan du springe dette trin over nu. Næste gang du starter en ny dispenser, har du mulighed for at tilføje startdatoen på din "Medicin"-skærm.

### 3.5 Log ind

Hvis du logger ud eller skifter enhed, kan du logge ind på din eksisterende konto igen ved at vælge "Jeg har allerede en konto" på velkomstskærmen. Vælg derefter den samme loginmetode, som du brugte, da du oprettede kontoen, enten Google, Apple (hvis du bruger en iPhone) eller e-mail.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 4. Sådan bruger du Levilog

Brug Levilog til at få påmindelser om, hvornår det er tid til at tage din medicin, og til at logge ind i appen, når du har indtaget din dosis.

Du navigerer i appen ved at klikke på ikonerne nederst på skærmen.

### 4.1 Notifikationer

Du modtager en notifikation, når det er tid til at tage din medicin. Tryk på notifikationen for at åbne appen og logge din dosis.

Hvis du ikke reagerer på notifikationen, kan du få en ny påmindelse efter 5 og 15 minutter. Du vælger, om du vil have disse ekstra påmindelser, når du opretter din konto, og kan derefter til enhver tid ændre disse indstillinger i appen.

### 4.2 Din dag

Du får adgang til denne skærm ved at trykke på "Din dag" i menuen nederst.

På dette skærmbillede kan du logge dine planlagte doser. Hvis det ikke er tid til at logge en dosis endnu, vises tidspunktet for, hvornår den næste dosis skal tages. Du kan vælge "Log tidligt", hvis du tager denne dosis før den planlagte tid. Hvis du gør det, tæller den som indtaget, og notifikationerne for den dosis kommer ikke.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

Nederst på skærmen er der et område, hvor du kan registrere eventuelle ekstra doser, du tager. For at logge en ekstra dosis skal du trykke på 'Log ekstra dosis' og angive antallet af tabletter, du har indtaget, og hvornår.

### 4.3 Historik

Du får adgang til denne skærm ved at trykke på "Historik" i menuen nederst. Den øverste del af skærmen viser de doser, du allerede har logget i dag. Ved at trykke på en dosis på listen kan du se og redigere detaljer.

Når du ruller ned, vises en oversigt over alle de doser, du nogensinde har logget i appen. Klik for at åbne en visning, hvor du kan se indsigter som "gennemsnitlig daglig dosis". For at se detaljer om en bestemt dag skal du trykke på den pågældende dag.

### 4.4 Medicin

Du får adgang til denne skærm ved at trykke på "Medicin" i den nederste menu. Her er der flere funktioner, der letter håndteringen af din medicin.

- **Din medicinplan**

Her kan du se tidspunkter og doser for dit planlagte medicinindtag. Hvis du har brug for at foretage ændringer, kan du trykke på "Skift plan". Skift kun din plan i henhold til din læges ordination.

- **Tabletter tilbage**

Her kan du se et skøn over, hvor mange tabletter du har tilbage i din

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

dosisbeholder. Når det er tid til at starte en ny dispenser, kan du registrere det ved at trykke på "Start ny"

- **Sådan bruger du din dispenser**

Her er vejledning til, hvordan du håndterer din dispenser. Tryk på "Se instruktion" for detaljerede oplysninger.

- **Lydsignal ved lydløs**

Hvis du bruger en iPhone og har valgt at have påmindelser, der afspiller lyd, selv når din telefon er på lydløs, er der også mulighed for midlertidigt at slukke for den lyd herfra.

## 4.5 Indstillinger


I øverste hjørne af hver skærm er der et lille tandhjul. Ved at trykke på det kommer du til appens indstillinger. Der er indstillinger for notifikationer, muligheden for at kontakte teknisk support, oplysninger om appen (appens mærkning, hvor linket til denne brugervejledning også findes), samt din brugeraftale og dine samtykker. Du kan også ændre indstillinger for din konto, såsom e-mailadresse eller adgangskode, og endda logge ud eller slette din konto. OBS. Hvis du vælger at slette din konto, slettes alle dine loggede data, og kontoen kan ikke genskabes.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

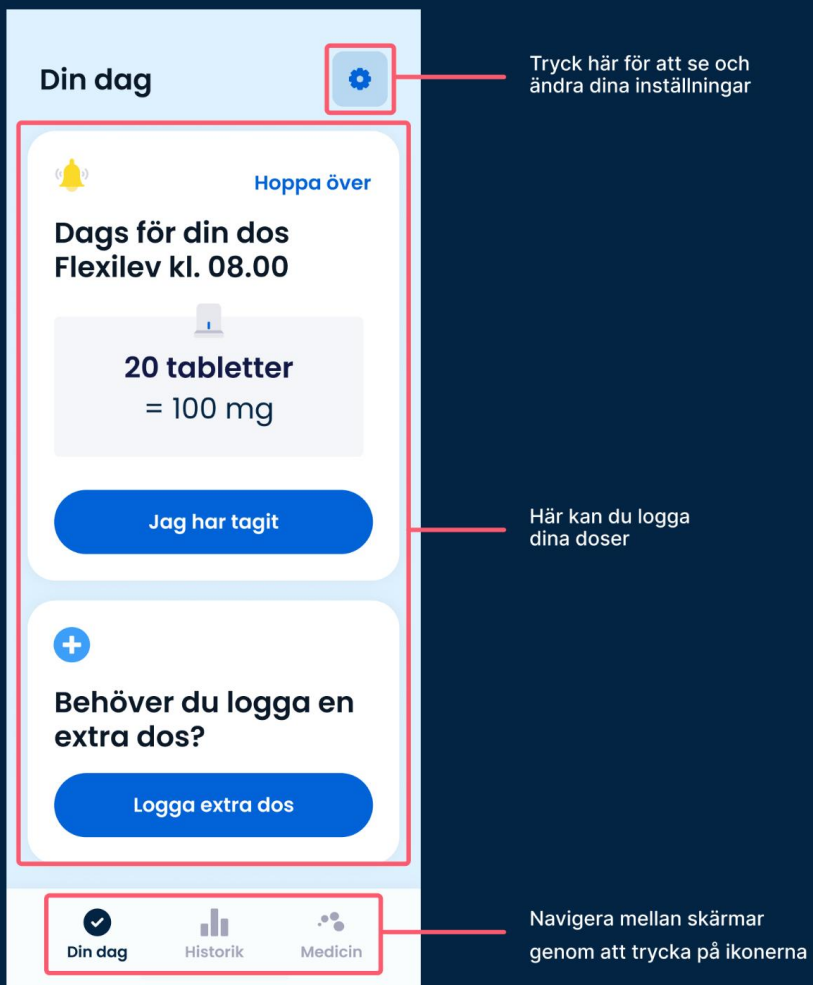

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 4.6 Hvor ofte skal du bruge Levilog?

Åbn Levilog mindst en gang om dagen, når din telefon har internetforbindelse. Dette er nødvendigt for, at appen kan planlægge notifikationer for de kommende dage og fortsætte med at sende påmindelser.

Levilog fungerer bedst, hvis du registrerer dine doser omhyggeligt. Sørg for at logge hver gang du tager din medicin, både dine planlagte og ekstra doser. Dette giver dig en komplet historik over dit medicinindtag og sikrer, at estimatet af "Tabletter tilbage" er korrekt.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 5. Teknisk support

### 5.1 Kontakt support

Hvis du støder på tekniske problemer, føler dig usikker eller opdager noget, der ikke ser ud til at være korrekt, skal du klikke på tandhjulet øverst på skærmene "Din dag", "Historik" eller "Medicin". Rul gennem listen, og vælg "Kontakt support" for at sende en e-mail til supportteamet. De vil hjælpe dig videre. Du kan forvente at modtage et svar den næste hverdag, efter du har sendt din anmodning.

Hvis du ikke kan få adgang til appen, kan du også kontakte supportteamet ved at sende en e-mail direkte til [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com).

### 5.2 Nulstil adgangskode

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du klikke på "Glemt adgangskode?" på loginsiden, og indtaste din e-mailadresse. Når du har modtaget en e-mail (tjek din spam-mappe, hvis det tager lang tid), skal du kopiere bekræftelseskode og gå tilbage til appen for at vælge en ny adgangskode.

Hvis du ikke kan få adgang til appen, skal du sende os en e-mail på [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com).

### 5.3 Udskriv brugsvejledningen

Brugsvejledningen leveres i et printvenligt format. Vælg printerfunktionen i din browser.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

Du kan også anmode om brugsvejledningen i papirform ved at sende en e-mailanmodning til [levilogsupport@navamedic.com](mailto:levilogsupport@navamedic.com). Brugsvejledningen sendes med posten inden for en uge uden ekstra omkostninger.

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 6. Ordliste over ISO-symboler

Symbolerne, der bruges i denne app, følger EN-ISO 15223-1:2021-standarden, hvilket sikrer en klar og konsekvent kommunikation af medicinske oplysninger.



Producent



Fremstillingsdato



Medicinsk udstyr

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0



Unik enhedsidentifikation



Se brugsvejledningen

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0

## 7. Kontaktoplysninger

Navamedic AB  
Göteborgsvägen 74  
433 63 Sävedalen  
Sverige

**info@navamedic.com**

**Dokumentnummer:**  
AT06-17 (DK)

**Dokumentversion**  
4.0

**Dato:**  
25. maj 2026

**Produktversion**  
1.0