



Levilog

Käyttöohjeet

Päivämäärä: 25. toukokuu 2026

Asiakirjan numero: AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio: 4.0

Tuoteversio: 1.0

Tuotetunnus: AT06

Yksilöllinen UDI-DI-tunniste: 73323531000LX

CE

Levilog	1
1. Tietoa Levilogista	3
1.1 Valmistaja	4
1.2 Käyttötarkoitus	4
1.3 Kuka voi käyttää Levilogia?	4
1.4 Vasta-aiheet	4
1.5 Kuinka Levilog toimii?	5
1.5.1 Oikea-aikaiset lääkemuistutukset	5
1.5.2 Kirjaa annoksesi	5
1.5.3 Sinulla on oltava voimassa oleva resepti	5
2. Tietoa riskeistä ja hyödyistä	6
2.1 Levilogin käytön riskit	6
2.2 Levilogin käytön hyödyt	6
2.3 Varoitukset ja varotoimet	6
2.4 Ilmoita vakavista tapahtumista	7
3. Aloita	8
3.1 Tekniset vaatimukset	8
3.2 Ohjelmistopäivitykset ja järjestelmävaatimukset	8
3.2.1 Ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset	8
3.2.2 Järjestelmävaatimukset	9
3.3 Asennus	9
3.3.1 Levilogin asentaminen iPhonelle tai iPadille:	9
3.3.2 Levilogin asentaminen Androidille:	9
3.4 Rekisteröityminen	10
3.4.1 Vahvista reseptisi	10
3.4.2 Anna sovellukselle lupa käsitellä tietojasi	11
3.4.3 Luo tili	11
3.4.4 Luo annosteluaikataulu	11
3.4.5 Ilmoitusten käyttöön ottaminen	12
3.4.6 Aseta muistutukset lääkkeiden täyttämisestä	13
3.5 Kirjaudu sisään	14

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

4. Levilogin käyttö	15
4.1 Ilmoitukset	15
4.2 Päiväsi	15
4.3 Historia	16
4.4 Lääke	16
4.5 Asetukset	17
4.6 Kuinka usein sinun täytyy käyttää Levilogia?	19
5. Tekninen tuki	20
5.1 Ota yhteyttä tukeen	20
5.2 Palauta salasana	20
5.3 Tulosta käyttöohjeet	20
6. ISO-symbolien sanasto	22
7. Yhteystiedot	24

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

1. Tietoa Levilogista

1.1 Valmistaja

Navamedic AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen
Ruotsi

1.2 Käyttötarkoitus

Levilog on tarkoitettu tukemaan Parkinsonin taudin hoitoa helpottamalla määrätyn lääkityksen noudattamista. Levilog antaa potilaille muistutuksia, jotka auttavat heitä ottamaan oikean annoksen oikeaan aikaan sekä kirjaamaan ja seuraamaan lääkityksen ottamista.

1.3 Kuka voi käyttää Levilogia?

Levilog on tarkoitettu sinulle, jos:

- Käytät lääkettä, joka annostellaan OraFID-annostelijalla Parkinsonin taudin hoitoon
- Olet vähintään 18-vuotias.
- Olet perehtynyt älypuhelimien ja mobiilisovellusten käyttöön.

1.4 Vasta-aiheet

Sovellusta tulee käyttää vain OraFID:n avulla annosteltavien lääkkeiden ottamiseen, se ei sovellu käytettäväksi muiden lääkkeiden ottamiseen.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

1.5 Kuinka Levilog toimii?

1.5.1 Oikea-aikaiset lääkemuistutukset

Levilog lähettää ilmoituksia varoittaakseen sinua, kun on lääkeannoksen aika. Kun painat ilmoitusta, sovellus avautuu, jotta voit rekisteröidä ottaneesi annoksen. Levilog lähettää myös ilmoituksia, kun nykyisen OraFID-annostelijan tabletit alkavat loppua, joten voit varmistaa, että sinulla on uusi annostelija valmiina.

1.5.2 Kirjaa annoksesi

Voit siirtyä Päiväsi-näytölle ja kirjata aikataulutetut annokset tai ylimääräiset lääkeannokset.

Mitä tarkemmin kirjaat lääkkeesi ottamisen, sitä paremmin sovellus toimii sinulle. Saat esimerkiksi oikea-aikaisia muistutuksia, kun OraFID-annostelija on loppumassa, oikeanlaisen historian sekä tietoa siitä, kuinka paljon lääkettä olet ottanut päivittäin.

1.5.3 Sinulla on oltava voimassa oleva resepti

Päästäksesi Levilogiin tarvitset voimassa olevan reseptin OraFID-annostelijalla annosteltavalle lääkkeelle. Jotta voit luoda tilin, sinun on vahvistettava reseptisi skannaamalla lääkepakkauksesi tai annostelijasi numero, joten varmista, että lääkkeesi on lähellä, kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

2. Tietoa riskeistä ja hyödyistä

2.1 Levilogin käytön riskit

Levilogin käytöllä ei ole tunnettuja vakavia riskejä. Se on kuitenkin tukityökalu, eikä sitä tule käyttää ainoana menetelmänä oikeanlaisen lääkkeen oton varmistamiseksi. Levilogin toimivuus riippuu käyttäjän tekemästä oikeasta syötteestä, oikeista järjestelmäasetuksista ja vakaasta internetyhteydestä.

2.2 Levilogin käytön hyödyt

Levilog auttaa sinua noudattamaan määrättyä annostelua. Kun otat lääkkeesi määrättyinä ajankohtana lääkärisi määräyksen mukaisesti, lisäät mahdollisuuksia saada vakaata helpotusta oireisiisi.

2.3 Varoitukset ja varotoimet

- **Jotta saat lääkemuistutuksia, sinun on sallittava, että sovellus lähettää ilmoituksia.** Sinua pyydetään sallimaan se, kun luot tilisi. Jos kieltäydyt, voit myöhemmin siirtyä puhelimen asetuksiin ja ottaa ilmoitukset käyttöön.
- **Jotta saat jatkossakin lääkemuistutuksia, sinun on avattava sovellus vähintään kerran päivässä, kun puhelin on yhdistetty internetiin.** Näin varmistat, että sovellus voi aina aikatauluttaa uusia ilmoituksia.
- **Jotta saat aina muistutuksia Levilogilta, varmista, että puhelimesi tai tablettisi akku ei lopu.**
- Kun käytät kameraa annosteluaikataulun lisäämiseen tai päivittämiseen, voi olla joitain rajoituksia, koska kuvaa analysoiva tekoäly voi tehdä virheitä.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

Siksi on tärkeää, että tarkistat aina tablettien määrän ja annosten ajankohdat, kun luot aikataulusi kameran avulla. Näin voit varmistaa, että aikataulusi vastaa lääkärisi määräämää aikataulua.

- **Muuta aikataulua vain lääkärisi ohjeiden mukaisesti.** Levilog on suunniteltu siten, että voit itse mukauttaa annosteluaikataulusi sovelluksessa lääkärisi antamien ohjeiden mukaisesti. Siksi on tärkeää, että noudatat näitä ohjeita huolellisesti.
- **Huomaa, että aloituspäivä ja se, miten kirjaat annoksesi, vaikuttavat jäljellä olevat tabletit -toimintoon.** Sovellus laskee tablettien kokonaismäärän annostelijassa ja vähentää automaattisesti aikataulutetut annokset, vaikka et kirjaisi niitä aktiivisesti. Jos lisäät annoksia, merkitset annokset "unohdetuiksi" tai muutat tablettien määrää annoksessa, sovellus ottaa nämä muutokset huomioon ja päivittää jäljellä olevien tablettien laskennan.
- Kun matkustat, lääkitysaikataulusi mukautuu automaattisesti puhelimen aikavyöhykkeeseen. Jos esimerkiksi otat annoksen klo 8.00 ja matkustat toiselle aikavyöhykkeelle, saat muistutuksen ottaa annoksen klo 8.00 uudella aikavyöhykkeellä. **Ennen kuin matkustat eri aikavyöhykkeiden välillä, on tärkeää keskustella lääkärisi kanssa siitä, miten hoidat parhaiten lääkitysaikataulusi.**

Ilmoita Levilogin käyttöön liittyvistä haittatapahtumista tai ei-toivotuista tapahtumista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista Navamedicille ja Ruotsin lääkevirastolle.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

2.4 Ilmoita vakavista tapahtumista

Ilmoita Levilogin käyttöön liittyvistä haittatapahtumista tai ei-toivotuista tapahtumista, vaaratilanteista ja onnettomuuksista valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon olet asettunut, eli seuraaville:

Läkemedelsverket (Ruotsissa), Skattestyrelsen – Central Customs Division (Tanskassa), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Suomessa) ja Legemiddelverket (Norjassa).

Ilmoita asiasta valmistajalle Navameduc AB:lle sähköpostitse osoitteeseen **info@navamedic.com**.

3. Aloita

3.1 Tekniset vaatimukset

Levilogin käyttämiseksi tarvitset älypuhelimien tai tabletin, jossa on iOS 18 tai uudempi tai Android 15 tai uudempi. Tarvitset myös luotettavan internetyhteyden.

3.2 Ohjelmistopäivitykset ja järjestelmävaatimukset

Laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ohjelmistopäivityksiin ja käyttöjärjestelmien yhteensopivuuteen sovelletaan seuraavia määräyksiä:

3.2.1 Ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset

- Sovellus voi saada säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä, mukaan lukien tietoturvakorjauksia, suorituskyvyn parannuksia ja uusia ominaisuuksia.
- Päivitykset toimitetaan sovellusten virallisten jakelualustojen (Apple App Store tai Google Play Kauppa) kautta.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

- Alusta vahvistaa automaattisesti kaikkien päivitysten eheyden ja aitouden ennen asennusta.
- On suositeltavaa ottaa käyttöön automaattiset päivitykset sen varmistamiseksi, että laite käyttää aina uusinta validoitua ohjelmistoversiota.

3.2.2 Järjestelmävaatimukset

- Yhteensopivuutta uusien käyttöjärjestelmien kanssa seurataan ja testataan säännöllisesti; käyttäjien on ehkä päivitettävä laitteensa käyttöjärjestelmä turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Sovelluksen käyttö käyttöjärjestelmissä, joita ei tueta tai jotka ovat liian vanhoja, voi johtaa rajoitettuun toimivuuteen tai käyttökelvottomuuteen.

3.3 Asennus

3.3.1 Levilogin asentaminen iPhoneille tai iPadille:

1. Avaa App Store.
2. Kirjoita hakukenttään "Levilog" ja etsi sovellus, jonka kuvake näyttää liitteenä olevalta logolta.



3. Paina "Asenna".
4. Anna Apple ID -salasanasi.
5. Kun sovellus on asennettu, avaa Levilog napauttamalla sovelluksen kuvaketta.

3.3.2 Levilogin asentaminen Androidille:

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

1. Avaa Google Play Kauppa.
2. Kirjoita hakukenttään "Levilog" ja etsi sovellus, jonka kuvake näyttää liitteenä olevalta logolta.



3. Paina "Asenna".
4. Kun sovellus on asennettu, avaa Levilog napauttamalla sovelluksen kuvaketta.

3.4 Rekisteröityminen

Kun avaat sovelluksen, pääset Levilogin aloitusoppaan aloitusnäytölle. Aloita rekisteröityminen napsauttamalla "Käynnistä opas".

3.4.1 Vahvista reseptisi

Sitten sinua pyydetään vahvistamaan, että sinulla on voimassa oleva resepti. Vahvistat tämän syöttämällä Vnr-numeron, jonka löydät pakkauksesta ja annostelijasta.

Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:

1. Ottamalla kamerallasi kuvan annostelijasta tai lääkepakkauksesta. Muista sallia kameran käyttö, kun sinua pyydetään tekemään niin, ja noudata sitten annettuja ohjeita.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

2. Syöttämällä numeron manuaalisesti. Valitse tässä tapauksessa vaihtoehto "En halua käyttää kameraa". Noudata sitten sovelluksen antamia ohjeita.

3.4.2 Anna sovellukselle lupa käsitellä tietojasi

Sinun on annettava suostumuksesi, jotta Levilog voi kerätä ja käsitellä tietoja lääkkeistäsi ja lääkkeiden ottamisesta. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen ja hallinnoida annosteluaikatauluasi.

Hyväksy ja siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla "Hyväksyn". Voit lukea lisää tietojesi käsittelystä painamalla Tietosuojakäytäntö-linkkiä.

3.4.3 Luo tili

Jos käytät Android-laitetta, voit rekisteröityä joko Google-tililläsi tai sähköpostilla ja salasanalla. Jos käytät iPhonea, sinulla on samat vaihtoehdot sekä mahdollisuus käyttää Apple-tiliäsi.

Jos päätät rekisteröityä sähköpostilla ja salasanalla, sinun on vahvistettava sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiviestin, jossa on vahvistuskoodi, joka sinun on syötettävä sovellukseen jatkaaksesi.

3.4.4 Luo annosteluaikataulu

Tässä vaiheessa syötät päivittäisen annosteluaikataulusi sovellukseen. Koska sovelluksen avulla voit tehdä tämän itse, on tärkeää, että otat itse vastuun lääkärin määräyksen noudattamisesta.

Jos lääkäri on antanut sinulle aikataulusi sisältävän paperin

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

Valitse "Kyllä, minulla on se" kysymykseen, oletko saanut lääkäriltäsi aikataulun, lisätäksesi aikataulun sovellukseen ottamalla kuvan. Noudata sitten näitä ohjeita:

1. Jos sovellus käyttää kameraa ensimmäistä kertaa, sinun on ensin sallittava, että sovellus käyttää kameraa.
2. Salli sitten, että sovellus käsittelee kuvien tietoja.
3. Ota kuva aikataulusi sisältävästä paperista ja odota, että sovellus analysoi kuvan ja luo aikataulusi.
4. Tarkista sovelluksen ehdottama aikataulu huolellisesti. Huomaa, että kuvia analysoiva tekoäly voi tehdä virheitä, joten on tärkeää tarkistaa, että kunkin annoksen ajat ja tablettien määrä ovat oikein.

Jos et ole saanut aikataulusi sisältävää paperia tai et halua käyttää kameraa

Valitse "Ei, minulla ei ole aikataulua" kysymykseen, oletko saanut aikataulun lääkäriltäsi, ja luo aikataulusi manuaalisesti seuraamalla näitä vaiheita:

1. Luo ensimmäinen annos napsauttamalla "Lisää annos".
2. Syötä aika ja tablettien määrä ja valitse sitten "Tallenna".
3. Toista prosessi jokaiselle annokselle, kunnes olet luonut koko määrätyn aikataulusi.

Varmista, että sovelluksen annostelu-aikataulu vastaa tarkasti lääkärin antamia ohjeita. Sinun tulee muuttaa aikataulua vain lääkärin neuvon mukaisesti.

3.4.5 Ilmoitusten käyttöön ottaminen

Jotta saat muistutuksia lääkkeen ottamisesta, sinun on sallittava, että sovellus lähettää ilmoituksia. Suosittelemme, että teet näin, koska ilmoitukset ovat tärkeä ominaisuus, joka auttaa sinua ottamaan lääkkeesi oikeana annoksena oikeaan aikaan.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

1. Kun sinulta kysytään, voiko Levilog lähettää sinulle ilmoituksia, sinun on valittava "Salli". Jos valitset "Älä salli", et saa sovelluksesta mitään muistutuksia.

Jos valitset vahingossa "Älä salli", voit muuttaa sitä puhelimen asetuksissa.

2. Jos sallit ilmoitukset ja käytät iPhonea, sinulta kysytään, haluatko ilmoitusten toistavan ääntä, vaikka puhelin olisi mykistetty. Tätä suositellaan, jotta et jää paitsi tärkeistä muistutuksista.
Ota tämä käyttöön seuraavasti:
 - a. Valitse "Kyllä, ota ilmoitukset aina käyttöön".
 - b. Paina "Salli", kun puhelin kysyy, haluatko sallia kriittiset hälytykset.
3. Seuraavalla näytöllä voit tarkistaa ja muokata ilmoitusasetuksiasi.

3.4.6 Aseta muistutukset lääkkeiden täyttämistä

Lopuksi sinun on asetettava muistutukset lääkkeiden täyttämistä Jäljellä olevat tabletit -toiminnossa.

Jotta sovellus voi laskea jäljellä olevien tablettien määrän oikein, sen on tiedettävä, milloin aloitit nykyisen annostelijan käytön. Näitä tietoja käytetään ilmoittamaan sinulle, kun on aika vaihtaa uusi annostelija.

Jos et muista, milloin aloitit nykyisen annostelijan käytön, voit ohittaa tämän vaiheen nyt. Kun seuraavan kerran aloitat uuden annostelijan käytön, voit lisätä aloituspäivän Lääke-näytölle.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

3.5 Kirjaudu sisään

Jos kirjaudut ulos tai vaihdat laitetta, voit kirjautua uudelleen olemassa olevalle tilillesi valitsemalla aloitusnäytöltä "Minulla on jo tili". Valitse sitten sama kirjautumismenetelmä, jota käytit luodessasi tilin, joko Google, Apple (jos käytät iPhonea) tai sähköposti.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

4. Levilogin käyttö

Käytä Levilogia saadaksesi muistutuksia siitä, milloin on aika ottaa lääkkeesi, ja kirjautuaksesi sovellukseen, kun olet ottanut annoksesi.

Voit navigoida sovelluksessa napsauttamalla näytön alareunassa olevia kuvakkeita.

4.1 Ilmoitukset

Saat ilmoituksen, kun on aika ottaa lääkkeesi. Paina ilmoitusta avataksesi sovelluksen ja kirjataksesi annoksen.

Jos et toimi ilmoituksen mukaisesti, saatat saada uuden muistutuksen 5 ja 15 minuutin kuluttua. Voit valita tiliä luodessasi, haluatko näitä ylimääräisiä muistutuksia, ja voit muuttaa näitä asetuksia sovelluksessa milloin tahansa.

4.2 Päiväsi

Pääset tälle näytölle painamalla alareunan valikosta kohtaa "Päiväsi".

Tällä näytöllä voit kirjata aikataulutetut annokset. Jos ei ole vielä aika kirjata annosta, näytetään aika, jolloin seuraava annos otetaan. Voit valita "Kirjaa aikaisin", jos otat tämän annoksen ennen määritettyä aikaa. Jos teet niin, annos lasketaan otetuksi, eikä sitä koskevia ilmoituksia tule.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

Näytön alaosassa on alue, jolle voit kirjata mahdolliset ottamasi ylimääräiset annokset. Kirjaa ylimääräinen annos valitsemalla "Kirjaa ylimääräinen annos" ja kirjoita ottamiesi tablettien määrä ja milloin otit ne.

4.3 Historia

Pääset tälle näytölle painamalla alareunan valikosta kohtaa "Historia". Näytön yläosassa näkyvät annokset, jotka olet jo kirjannut tänään. Painamalla luettelossa olevaa annosta voit tarkastella ja muokata tietoja.

Kun vierität alas, näet yleiskatsauksen kaikista annoksista, jotka olet kirjannut sovellukseen. Napsauta avataksesi näkymän, jossa voit nähdä erilaisia tietoja, kuten "keskimääräinen päivittäinen annos". Näet tietyn päivän tiedot painamalla kyseistä päivää.

4.4 Lääke

Pääset tälle näytölle painamalla alareunan valikosta kohtaa "Lääke". Tässä on useita toimintoja, jotka helpottavat lääkityksesi hallintaa.

- **Lääkeaikataulusi**

Tässä näet aikataulutettujen lääkkeiden ottamisten ajat ja annokset. Jos sinun on tehtävä muutoksia, voit painaa "Muuta aikataulua". Muuta aikataulua vain lääkärin määräyksen mukaisesti.

- **Jäljellä olevat tabletit**

Tässä näet arvion siitä, kuinka monta tablettia annostelijassasi on jäljellä.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

Kun on aika aloittaa uusi annostelija, voit rekisteröidä sen painamalla "Aloita uusi"

- **Näin käytät annostelijaa**

Tässä on ohjeita annostelijan käsittelyyn. Saat lisätietoja painamalla "Katso ohjeet".

- **Äänimerkki, kun puhelin on mykistetty**

Jos käytät iPhonea ja olet valinnut muistutukset, jotka toistavat ääntä, vaikka puhelin olisi mykistetty, voit myös mykistää tämän äänen väliaikaisesti tästä.

4.5 Asetukset


Jokaisen näytön yläkulmassa on pieni ratas. Painamalla sitä pääset sovelluksen asetuksiin. Siellä on ilmoitusasetukset, mahdollisuus ottaa yhteyttä tekniseen tukeen, tietoa sovelluksesta (sovelluksen merkinnät, joissa on myös linkki tähän käyttöoppaaseen) sekä käyttäjäsovimuksesi ja suostumuksesi. Voit myös muuttaa tilisi asetuksia, kuten sähköpostiosoitetta tai salasanaa, ja myös kirjautua ulos tai poistaa tilisi. HUOMIO! Jos päätät poistaa tilisi, kaikki kirjautut tietosi poistetaan eikä tiliä voida luoda uudelleen.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

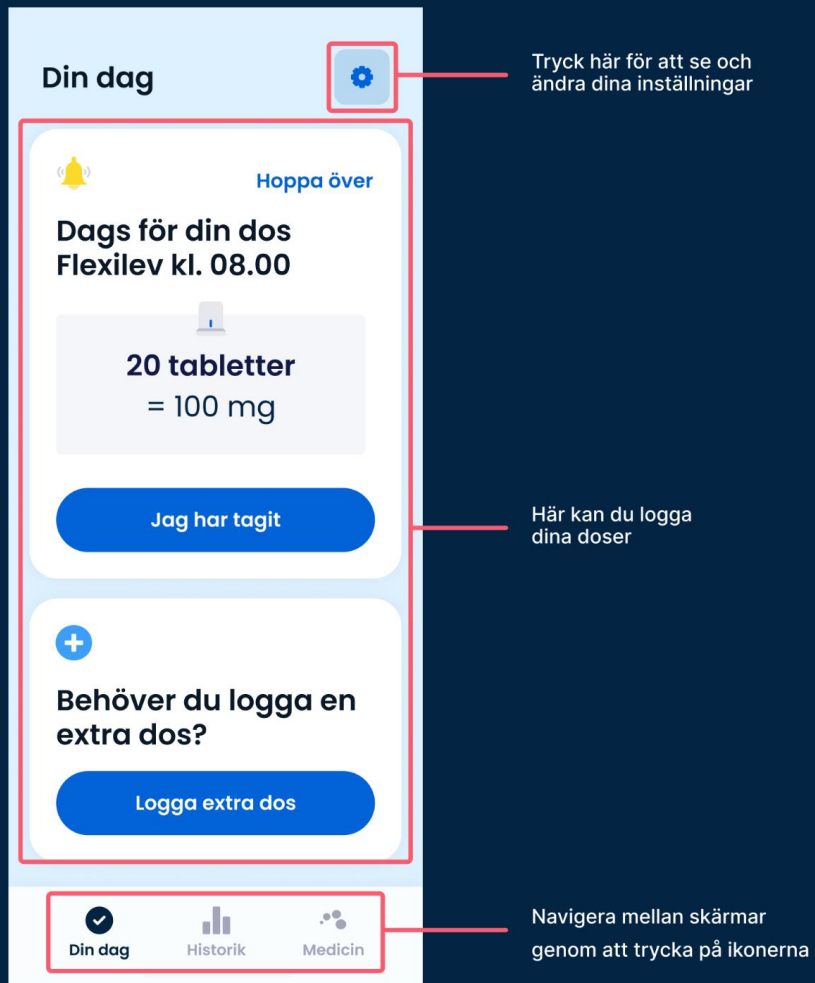

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

4.6 Kuinka usein sinun täytyy käyttää Levilogia?

Avaa Levilog vähintään kerran päivässä, kun puhelimesiasi on internetyhteys. Tämä on välttämätöntä, jotta sovellus voi aikatauluttaa ilmoituksia tuleville päiville ja jatkaa muistutusten lähettämistä.

Levilog toimii parhaiten, jos kirjaat annoksesi huolellisesti. Muista kirjata joka kerta, kun otat lääkkeen, sekä aikataulutetut että ylimääräiset annokset. Tämä antaa sinulle täydellisen lääkkeen ottamisen historian ja varmistaa, että Jäljellä olevat tabletit -luku on oikea.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

5. Tekninen tuki

5.1 Ota yhteyttä tukeen

Jos kohtaat teknisiä ongelmia, tunnet olosi epävarmaksi tai huomaat jotain, mikä ei näytä olevan oikein, napsauta rataskuvaketta Päiväsi-, Historia- tai Lääke-näytön yläreunassa. Selaa luetteloa ja valitse "Ota yhteyttä tukeen" lähettääksesi sähköpostia tukitiimille. He auttavat sinua. Voit odottaa saavasi vastauksen seuraavana arkipäivänä pyynnön lähettämisestä.

Jos et pääse sovellukseen, voit myös ottaa yhteyttä tukitiimiin lähettämällä sähköpostia suoraan osoitteeseen levilogsupport@navamedic.com.

5.2 Palauta salasana

Jos olet unohtanut salasanasasi, napsauta "Unohtuiko salasana?" sisäänkirjautumissivulla ja kirjoita sähköpostiosoitteesi. Kun olet saanut sähköpostiviestin (tarkista roskapostikansio, jos se kestää kauan), kopioi vahvistuskoodi ja palaa sovellukseen valitsemaan uusi salasana.

Jos et pääse sovellukseen, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen levilogsupport@navamedic.com.

5.3 Tulosta käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat tulostettavassa muodossa. Valitse tulostustoiminto selaimestasi. Voit myös pyytää paperisia käyttöohjeita lähettämällä pyynnön osoitteeseen levilogsupport@navamedic.com. Käyttöohjeet lähetetään postitse viikon kuluessa ilman lisäkustannuksia.

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)


Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025


Tuoteversio
1.0

6. ISO-symbolien sanasto

Tässä sovelluksessa käytetyt symbolit noudattavat standardia EN-ISO 15223-1:2021, mikä varmistaa lääketieteellisten tietojen selkeän ja johdonmukaisen välittämisen.

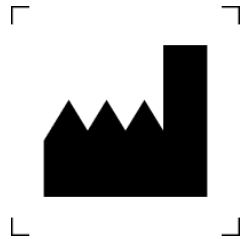

Valmistaja

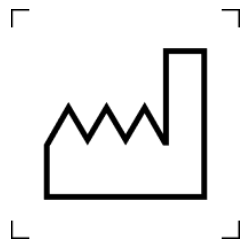

Valmistuspäivämäärä



Lääkinnällinen laite

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0



Yksilöllinen laitetunniste



Katso käyttöohjeet

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0

7. Yhteystiedot

Navamedic AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen
Ruotsi

info@navamedic.com

Asiakirjan numero:
AT06-17 (FI)

Asiakirjan versio:
4.0

Päivämäärä:
25. toukokuu 2025

Tuoteversio
1.0